

Pescado y marisco

Seguridad alimentaria






Soluciones para histamina



ELISA

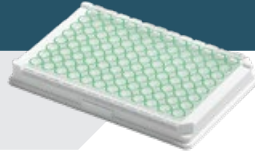

Bio-Shield Histamine



 **20min**

Perfecto para la industria alimentaria, fábricas de conservas, laboratorios, exportadores y fabricantes que requieren la mayor precisión y una eficiencia validada.

Características destacadas del producto:

- ✓ **Certificación AOAC PTM**
- ✓ **Uno de los LOQ más bajos** del mercado: 2.74 ppm
- ✓ **Sin disolventes orgánicos:** extracción acuosa
- ✓ **Hasta 42 muestras** por placa
- ✓ **Sin paso de acilación:** protocolo simplificado

Especificaciones:

- **LOD** 1.42 mg/kg
- **Rango de cuantificación:** 2.74-200 mg/kg
- **Formato:** 48, 96 o 576 pocillos
- **Lector:** BYONoy Absorbance 96 portátil
- **Software:** Prognosis Data Reader (PDR)

NUEVO Bio-Shield Histamine ES

✓ Extra sensible a 0.5 ppm



1-Standard Histamine

 **20min**

Análisis de histamina simplificado: un solo patrón y más pocillos para muestras.

Características destacadas del producto:

- ✓ **Eficiente:** solo un patrón sin analito
- ✓ **Curva precalibrada:** configuración mínima
- ✓ **Respetuoso con el medio ambiente:** extracción acuosa
- ✓ **Perfecto para el cribado rutinario** de lotes pequeños

Especificaciones:

- **LOD** 2 ppm
- **Rango de cuantificación:** 2.5-200 ppm
- **Format:** 48 & 576 pocillos
- **Lector:** BYONoy Absorbance 96 portátil
- **Software:** Prognosis Data Reader (PDR)

LATERAL FLOW

Symmetric Histamine



 **3min**



Permite detectar histamina de forma rápida, portátil y sencilla. Diseñado para la cuantificación in situ en fábricas, buques pesqueros e inspecciones de campo.

Características destacadas del producto:

- ✓ **Certificación AOAC PTM**
- ✓ No requiere acilación ni refrigeración
- ✓ **Cualitativo y cuantitativo:** verificación visual o lectura digital
- ✓ **Extracción acuosa en un solo paso**
- ✓ **Resultados fáciles de compartir** mediante la aplicación móvil para Android

Especificaciones:

- **LOD** 3.3 mg/kg
- **Rango de cuantificación:** 9.3 - 300 mg/kg
- **Formato:** 30 pruebas
- **Lector:** 3PR mini portátil o S-flow Reader
- **Software:** S-Flow

Monitoreo de la higiene



ATP- FLOW Surface ATP-FLOW TOTAL Water

Control rápido de higiene en superficies y sistemas de agua mediante hisopos, con el fin de prevenir la proliferación microbiana y la contaminación cruzada.

Ventajas principales:

- ✓ Resultados en **segundos**
- ✓ Ideal para el cumplimiento de las normas **HACCP** e **ISO**
- ✓ Para muestras de **superficie** y de **agua**
- ✓ Ayuda a optimizar los **ciclos de higienización en las plantas de pescado y marisco**
- ✓ **Phos Connect Cloud:** **almacenamiento seguro de datos en la nube**

Especificaciones:

- Detecta concentraciones de ATP extremadamente bajas **LOD = 0,53 femtomoles**
- **Formato:** 25 hisopos
- **Lector:** Phos Reader 2
- **Software:** Phos Connect



Soluciones para el control de alérgenos



Allergen Shield Series

 **30min** | ELISA |

Cuantificación de alérgenos fácil, rápida y precisa. El protocolo estandarizado la hace especialmente adecuada para el análisis en laboratorio de productos alimentarios de matrices complejas.

Aspectos destacados:

- ✓ **Alta especificidad:** anticuerpos monoclonales
- ✓ **Kits de muestreo de superficies:** disponibles para todos los alérgenos
- ✓ **Cuantificación de 22 tipos de alérgenos:** amplia variedad de matrices

Specifications:

- Formato: 48 o 96 pocillos
- Lector: BYONNOY Absorbance 96 portátil
- Software: Prognosis Data Reader (PDR)

Almendra | Avellana | Cacahuete | Caseína | Piñón | Macadamia | Leche total | Huevo | Pecán | Pistacho | Coco
Sésamo | Gluten | Anacardo | Mostaza | Nuez de Brasil | Altramuz | Soja | Nuez | BLG | Crustáceos | Pescado



Allergen Free Series

 **5min** | FLUJO LATERAL |

Determinación de alérgenos in situ en formato casete. Una única extracción sin disolventes proporciona resultados cuantitativos y cualitativos para 21 alérgenos diferentes.

Aspectos destacados:

- ✓ **Una extracción y protocolo ecológicos:** para todos los alérgenos
- ✓ Para **productos alimenticios**, soluciones **CIP** y **superficies de trabajo**
- ✓ **HLínea gancho:** elimina los falsos negativos
- ✓ **Resultados fáciles de compartir** mediante la aplicación móvil para Android

Specifications:

- Formato: 10 o 30 casetes
- Lector: 3PR mini portátil o S-flow Reader
- Software: S-Flow

Almendra | Avellana | Cacahuete | Caseína | Macadamia | Leche total | Huevo | Pecán | Pistacho | Sésamo | Gluten
Anacardo | Mostaza | Nuez de Brasil | Altramuz | Soja | Nuez | BLG | Crustáceos | Frutos secos múltiples | Coco | Pescado